


Vocatex 4

Audiooptisches Lesegerät

Merkmale

- Kamera: Hochauflösend (Full HD)
- Darstellungsmodi: Fotomodus in Echtfarben, Positiv- und Negativdarstellung mit 28 Falschfarben
- Sprachausgabe: 34 Landessprachen mit 96 verschiedenen Sprachsynthesen
- Automatische Erkennung der Landessprache
- Sprachgeschwindigkeits- und Lautstärkeeinstellung
- Vergrößerung 2 - 72-fach (22" bis 32")
- Autofokus
- In der Grösse anpassbare Textzeile zum Mitlesen während dem Vorlesen
- Deaktivierbare Spaltenerkennung
- Kontrast-, Helligkeitseinstellung
- Kugelgelagerter Kreuztisch
- Regulierbare LED-Beleuchtung
- Leuchtende Bedienelemente mit Sprachunterstützung

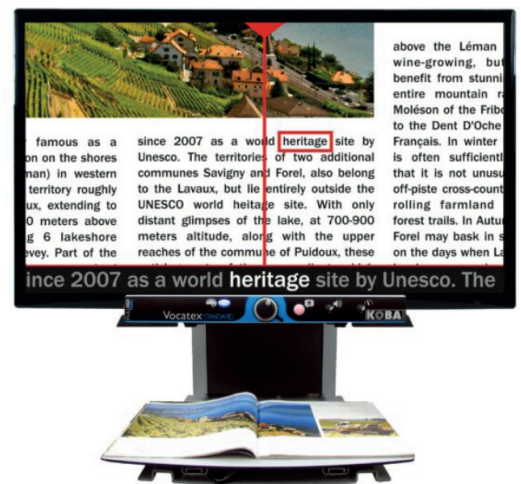

Wie lange kann Sie ein Bildschirmlesegerät unterstützen?

Sie benötigen ein Bildschirmlesegerät, weil die Lupenbrille oder Handlupe nicht mehr reicht. Nun stellen Sie sich die Frage, wie lange Sie das Gerät einsetzen können? Bei degenerativen Augenkrankheiten stellt sich oft die Frage, ab welchem Sehvermögen man zu einem Vorlesegerät (Scannerlesegerät) wechseln soll oder muss.

Vocatex – die Antwort auf diese Frage?

Kobavision hat es geschafft eine Texterkennung in ein Bildschirmlesegerät einzubauen. Was kompliziert klingt ist sehr einfach. Wenn Sie Text auf dem Bildschirm sehen und Sie diesen trotz

hoher Vergrößerung nicht gut lesen können drücken Sie einfach eine Taste am Gerät und nach einer Sekunde liest Ihnen eine angenehme Vorlesestimme diesen Text vor - eine ganze A4 Seite ohne Unterbruch. Sie können jederzeit stoppen und weiterfahren – oder eine andere Spalte zum Vorlesen wählen. Das ausgesprochene Wort wird dabei mit einer Box umrahmt. Dadurch haben Sie die Information, wo sich das gesprochene Wort im Text befindet. Der Vorteil von Vocatex ist, dass Sie jederzeit auch Bilder anschauen können oder handschriftliche Texte lesen und schreiben.

Bildschirmgrössen

Vocatex ist lieferbar mit 22“, 27“, 32“ oder 43“ Bildschirm.



Ein Produkt von:

